


SEAGO

Instrukcja obsługi

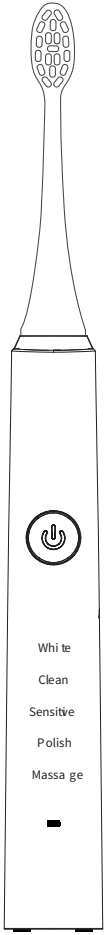

Soniczna szczoteczka do zębów

Model:SS

Dziękujemy za wybór naszej sonicznej szczoteczki do zębów. SEAGO jest zaangażowane w dostarczanie kosztowo-efektywnych produktów, aby lepiej czyścić zęby i chronić zdrowie jamy ustnej.


Ważne zabezpieczenia

- - Niektórzy ludzie mogą nie dostosować się do niego (takie jak stymulacja i uczucie zdrętwienia) przy pierwszym użyciu. Proszę się nie martwić, ponieważ jest to normalne, co zniknie po kilku użyciach. A ty będziesz przystosowany do tej szczoteczki w ciągu jednego tygodnia.
- - Nie należy otwierać, naprawiać ani zmieniać produktu bez autoryzacji.
- - Nie należy uderzać ani upuszczać produktu, jeśli produkt jest uszkodzony, należy zaprzestać używania.
- - przed podłączeniem do zasilania należy sprawdzić, czy lokalne napięcie jest odpowiednie do zaznaczonego napięcia.
- - Ten produkt może używać tylko specjalnej główki szczoteczki do zębów.
- - Jeśli w ciągu ostatnich dwóch miesięcy miał miejsce zabieg chirurgiczny w obrębie jamy ustnej lub dziąseł, przed użyciem należy skonsultować się z dentystą.
- - Jeśli zęby krwawią po użyciu szczoteczki lub krwawienie trwa dłużej niż tydzień, należy skonsultować się z dentystą.
- - Ten produkt jest przeznaczony do czyszczenia zębów, dziąseł i języka, nie do innych celów.
- - Dzieci powinny być nadzorowane, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i upewnić się, że nie bawią się szczoteczką.
- - Przechowuj szczoteczkę z dala od wysokiej temperatury i bezpośredniego światła słonecznego.

Elementy



Instrukcja

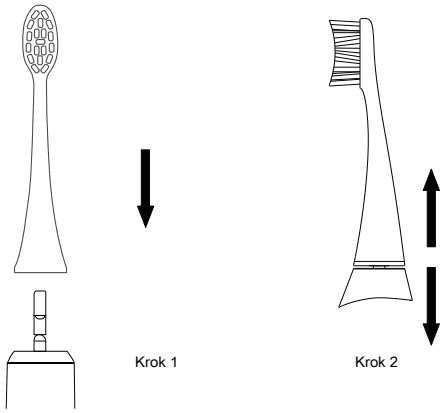

Funkcje

1. Efektywne czyszczenie jamy ustnej dzięki 40000 uderzeniom na minutę.
2. 5 Trybów pracy (White Clean Sensitive Polish Massage) żeby sprostać różnym wymaganiom.
3. Funkcja sygnalizacyjna włączenia zasilania : wszystkie wskaźniki trybów zapalają się przed rozpoczęciem użytkowania.
4. Produkt jest antypoślizgowy, łatwy do trzymania i ergonomicznie zaprojektowany.
5. Wodoodporność IPX7.
6. Bezpieczna i trwała bateria litowa działa przez około 45 dni na pełnym ładowaniu (w trybie ochrony wrażliwej), z przypomnieniem o braku zasilania i ładowaniem przez USB.
7. Inteligentne tryby pamięci, 2-minutowe automatyczne zatrzymanie i 30-sekundowe przypomnienie o czasie poruszania się, pomagając uzyskać dobre nawyki w szczotkowaniu.

Użytkowanie

1. Podłącz interfejs ładowania do źródła zasilania i rozpocznij ładowanie.
2. Załóż główkę szczoteczki i upewnij się, że jest zablokowana na swoim miejscu. Zmocz włosie i nałóż odpowiednią ilość pasty do zębów.
3. Delikatnie przyłóż główkę szczoteczki do zębów.
4. Przez kilka sekund delikatnie przesuwaj główkę szczoteczki po każdym odcinku zębów, w tym przednich, tylnych i powierzchniach żujących.
5. Przycisk wielofunkcyjny wymaga ciągłej pracy w ciągu 3 sekund dla pierwszego przełączenia trybu, w przeciwnym razie, to automatycznie przestanie działać.
6. Naciśnij przycisk wielofunkcyjny, będziesz miał opcje do wyboru (White Clean Sensitive Polish Massage) według osobistych preferencji.
7. Przejdź do następnej sekcji, gdy auto przypomnienie pauzuje krótko co 30 sekund. Po zakończeniu wszystkich 4 sekcji, automatycznie zatrzyma się po 2 minutach.

Instrukcja ładowania

1. Gdy czerwony wskaźnik miga po użyciu lub produktu nie można normalnie włączyć, oznacza to, że bateria jest słaba i wymaga doładowania.
2. Gdy produkt jest ładowany, ładowanie

Wskaźnik jest czerwony. Gdy akumulator jest w pełni naładowany, wskaźnik ładowania zmieni kolor na zielony, a ładowanie zostanie automatycznie wyłączone, aby zapobiec przeladowaniu akumulatora.

3. Przy pierwszym użyciu lub gdy czas jest niedoładowana przez długi okres czasu, to dlatego, że wskaźnik może nie świecić przez pierwsze 5 minut"

Informacje o produkcie

Mode : S5
napięcie wejściowe: 5V ~
Moc wejściowa: 1.5W
Materiał ABS/TPE/Nylon
Wymiary: 27X 26X 247mm
Czas ładowania: < 4 godzin
Zakres temperatur: 0-50°C
Zgodnie ze standardami: GB4706.59-2008
Kraj pochodzenia: Chiny


Ochrona środowiska.

Ten produkt zawiera baterię litową. Przed wyrzuceniem baterii wyjmij ją i poddaj recyklingowi lub wyrzuć zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami. W razie wątpliwości skonsultuj się z lokalnym działem gospodarki odpadami.

Do wyjmowania akumulatora potrzebne są następujące narzędzia: szczypce, nożyczki.

Uwaga: kiedy zdecydujesz się wyrzucić szczoteczkę do zębów, musisz wyjąć baterię. Przed wyjęciem upewnij się, że bateria jest rozładowana.

Podczas korzystania z narzędzi należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i podejmować środki ochronne, aby uniknąć obrażeń

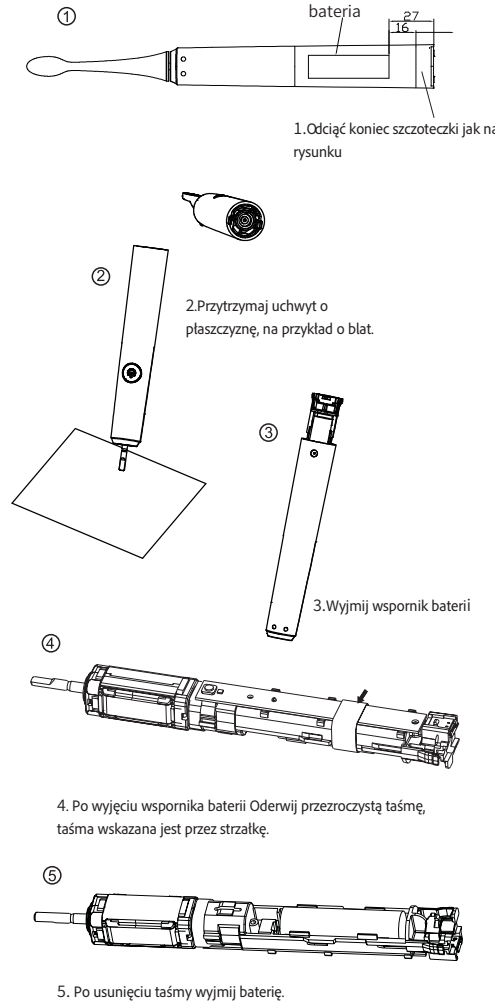

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Sila wibracji słabnie	Zbyt duża siła nacisku włosia na zęby	Delikatnie docisnij włosie do zębów
Czas pracy szczoteczki jest krótki	Problem z ładowaniem, nieprawidłowo podłączony kabel Niski poziom baterii	2. Sprawdź czy kabel podłączony jest prawidłowo 2. Wydłuż czas ładowania
Szczoteczka nie działa	Niski poziom baterii	1. Naładuj szczoteczkę 2. Skontaktuj się z nami

Gwarancja

Seago udziela gwarancji na okres 2 lat od pierwotnej daty zakupu na wady spowodowane wadliwym wykonaniem lub materiałami. W przypadku roszczeń gwarancyjnych wyslij wiadomość e-mail na adres info@seago.cn lub wyslij roszczenie na adres www.seago.cn, nasz dział obsługi klienta skontaktuje się z Tobą w celu zaniechania procedury gwarancyjnej.

Niniejsza gwarancja obejmuje części robocze. Nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych normalnym użytkowaniem lub wypadkami, takimi jak upuszczenie urządzenia. Inne wyjątki obejmują niewłaściwe użytkowanie lub zaniedbanie urządzenia. Niniejsza gwarancja jest nieważna, jeśli z urządzeniem są używane inne kable ładowające oprócz tego, który otrzymałeś. W przypadku wszelkich roszczeń gwarancyjnych, należy przedstawić dowód zakupu. Z tego powodu prosimy o zachowanie paragonu przez okres gwarancyjny. Niestety koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi. W przypadku pytań dotyczących produktu, zadzwoń do działu obsługi klienta seago pod numer 0086-574-88228700 lub wyslij e-mail na adres info@seago.cn

Ochrona środowiska

Informacje dla użytkownika o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Przedstawiony symbol przekreślonego kosza umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia ochronę zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki zwrotu.

Pozostałe informacje

Importer: Smartbest, ul. Dworcowa 28/22, 14-400 Pasłęk. Producent: NINGBO SEAGO ELECTRIC CO. LTD Address: No.239 Jianghu Road, Jiangbei District, Ningbo, Zhejiang, Chi na. WEB: www.seago.cn. Wyprodukowano w Chinach. Niniejszym NINGBO SEAGO ELECTRIC CO. LTD oświadcza, że urządzenie SG-977 jest zgodne z zasadniczymi wymogami oraz innymi stosowanymi postanowieniami dyrektywy EN 55014-1:2006 +A2:2011, EN 55014-2:2015v. Deklaracja zgodności do pobrania: www.seago.cn.

