

SEAGO



SZCZOTECZKA ELEKTRYCZNA SG-2107

INSTRUKCJA

Szanowny Kliencie:

SEAGO SG-2107 to szczoteczka elektryczna przeznaczona dla Twojego dziecka w wieku od 0 do 12 lat. Delikatne wibracje, mała główka i delikatne włosie są idealne do czyszczenia dziecięcych zębów i dziąseł. Dzięki unikalnemu systemowi mycia zębów i inteligentnemu systemowi czyszczenia pomagają rozwinąć prawidłowe nawyki od najmłodszych lat.


Bezpieczeństwo

- Dzieci poniżej 8 roku życia powinny być nadzorowane przez dorosłych.
- Urządzenie przeznaczone do użytku domowego do czyszczenia zębów, dziąseł i języka, nie stosować do innych celów.
- Nie otwierać, nie naprawiać, ani nie zmieniać urządzenia bez autoryzacji.
- Nie umieszczać w wysokich temperaturach oraz w bezpośrednim kontakcie ze światłem słonecznym


- Wyjmij baterię, jeżeli nie zamierzasz używać szczoteczki przez dłuższy czas.

- Jeśli w ciągu ostatnich 2 miesięcy Twoje dziecko miało operację w obrębie jamy ustnej lub dziąseł, przed użyciem tego urządzenia skonsultuj się z dentystą.
- Nie upuszczaj urządzenia, natychmiast przestań używać jeżeli jest uszkodzone.

Nazwy elementów

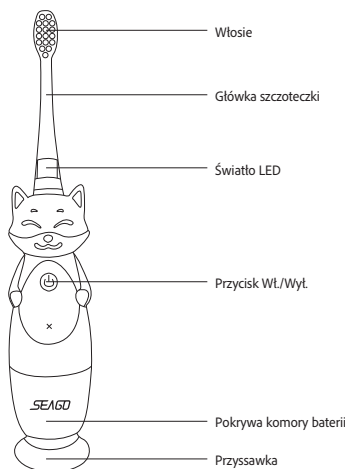


Wymiana główki szczoteczki

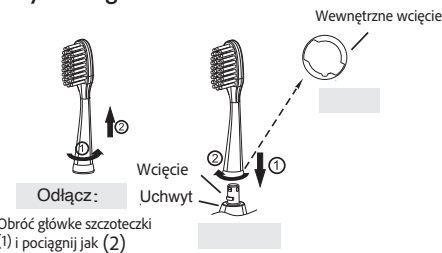

Wymiana baterii

Obróć komorę baterii zgodnie z kierunkiem ①, aby linia wskaźnika zwróciła się ze strzałką i wyciągnij ją jak ②. Włóż nową baterię AAA zgodnie z właściwym kierunkiem anody i katody. Naciśnij komorę baterii jako ③, aby linia wskaźnika zwróciła się ze strzałką i obróć ją mocno jako ④, a następnie linia wskaźnika zwróciła się z kropką.

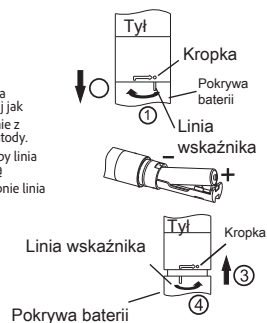


Cechy

1. Skutecznie czyść zęby z wibracjami 17 000 razy na minutę.
2. Nadaje się dla dzieci w wieku 0-12 lat.
3. Ergonomiczna konstrukcja, silikonowy uchwyt, antypoślizgowy, wygodny do trzymania.
4. Wodoodporność: IPX7.
5. Żywotność baterii: do 120 dni.
6. Inteligentny zegar: 2 minuty automatycznego zatrzymania i 30 sekund interwału, aby pomóc Ci rozwinąć dobre nawyki szczotkowania.
7. Tryby pracy:
 - ① Model jeden: biała dioda LED świeci bez żadnych wibracji.
 - ② Model drugi: szczoteczka do zębów wibruje białym światłem LED.

Instrukcja

1. Zwiłż włosie i nałóż odpowiednią ilość pasty do zębów. (Proszę przyłożyć włosie do zębów przed naciśnięciem przycisku włączania/wyłączania).
2. Przyłóż główkę szczoteczki do zębów pod niewielkim kątem w kierunku linii dziąseł.
3. Podziel obszar jamy ustnej na sekcje: lewą górną(1), prawą górną(2), lewą dolną(3) i prawą dolną(4).
4. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć, delikatnie przesuwaj główkę szczoteczki po zębach, wykonując mikro ruch w górę i w dół.
5. Proszę szczotkować przednią, tylną i żującą powierzchnię każdego z nich przez 10 sekund. Szczoteczka będzie przypominać o zmianie sekcji szczotkowania co 30 sekund z przerwami.
6. Szczoteczka do zębów wyłączy się automatycznie po 2 minutach. Upewnij się, że wszystkie cztery sekcje zostaną wyczyszczone w ciągu 2 minut.

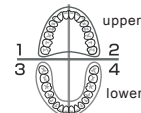

Informacje o produkcie

Nazwa produktu: Elektryczna szczoteczka do zębów
 Model: SG-2107
 Moc robocza: 0,24 W
 Napięcie robocze: 1,5 V =
 Materiał produktu: ABS / TPE / PCTG / silikon / nylonowa szczoteczka do zębów
 Wymiary: 166 x 31,4 x 31 mm
 Temperatura pracy: 0-50°C
 Wodoodporność: IPX7
 Standard produktu: GB4706.1-2005, GB4706.59-2008
 Pochodzenie: Chiny

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Sila wibracji słabnie	Zbyt mocno docisnięte włosie szczoteczki do zębów	Delikatnie docisnąć główkę do zębów.
Czas pracy jest krótki	Bateria jest rozładowana	Zmień baterie.
Szczoteczka przestała działać	1. Bateria jest rozładowana. 2. Inna przyczyna	1. Zmień baterię. 2. Proszę skontaktować się z nami

Karta gwarancyjna

Dziękujemy za wybranie szczoteczki sonicznej dla dzieci SEAGO SG-2107, która pomyślnie przeszła rygorystyczne procesy zapewnienia jakości. SEAGO gwarantuje, że szczoteczka do zębów SG-2107 będzie wolna od wad podczas normalnego użytkowania i obsługi przez pierwotnego nabywcę. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty wydrukowanej na ważnej fakturze przez okres 1 roku, nieautoryzowany demontaż lub naprawa spowoduje unieważnienie gwarancji. Produkt można zwrócić w ciągu 7 dni lub wymienić w ciągu 15 dni od zakupu.

Prosimy o wypełnienie poniższych informacji przez klienta

Nazwa klienta _____ Data zakupu _____

Dane kontaktowe _____

wypełnij poniższe informacje przez sprzedawcę detalicznego

Nr modelu _____ Data produkcji _____

nazwa sprzedawcy _____

Ochrona środowiska

Informacje dla użytkownika o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Przedstawiony symbol przekreślonego kosza umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki zwrotu.

Pozostałe Informacje

Importer: Smartbest, ul. Dworcowa 28/22, 14-400 Pasłęk. Producent: NINGBO SEAGO ELECTRIC CO. LTD Address: No.239 Jianghu Road, Jiangbei District, Ningbo, Zhejiang, Chi na. WEB: www.seago.cn. Wyprodukowano w Chinach. Niniejszym NINGBO SEAGO ELECTRIC CO. LTD oświadcza, że urządzenie SG-977 jest zgodne z zasadniczymi wymogami oraz innymi stosowanymi postanowieniami dyrektywy EN 55014-1:2006+A2:2011, EN 55014-2:2015v. Deklaracja zgodności do pobrania: www.seago.cn.

