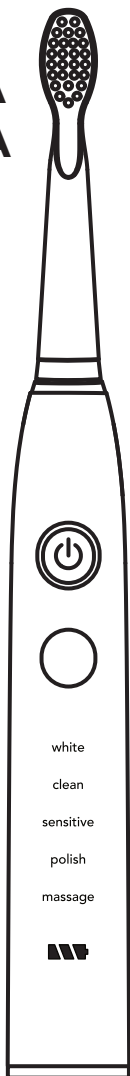


SEAGO

SZCZOTECZKA
SONICZNA DLA
DOROSŁYCH

INSTRUKCJA

MODEL
575

CECHY

- Wibracje soniczne, do 40.000 uderzeń na minutę.
- 2 minutowy inteligentny timer z przypomnieniem o pauzie (30 sekund)
- Wodoodporność IPX7
- 5 trybów czyszczenia:
 1. White - Czyszczenie zębów z polerowaniem i wybielaniem.
 2. Clean - Codzienne czyszczenie.
 3. Sensitive - Delikatne dla wrażliwych dziąseł.
 4. Polish - Odwrócona częstotliwość do polerowania zębów.
 5. Massage - Odwrócona częstotliwość do pielęgnacji dziąseł.

GŁÓWNE ELEMENTY

1. Standardowa główka szczoteczki(4)
2. Główka szczoteczki międzyzębowej(1)
3. Wodoodporna szczoteczka soniczna (1)
4. Etui (1)
5. Przewód USB (1)

ZALECENIA

Ładowarkę należy trzymać z dala od wody. Nie umieszczać ani nie przechowywać jej nad lub w pobliżu wody znajdującej się w zlewie, wannie itp. Nie zanurzać ładowarki w wodzie ani w żadnym innym płynie. Po wyczyszczeniu upewnij się, że ładowarka jest całkowicie sucha, zanim podłączysz ją do sieci.

OSTRZEŻENIE O BEZPIECZEŃSTWIE


1. Urządzenie może być używane przez dzieci i osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub też nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli otrzymały one lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia.
2. Dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
3. Nie należy używać ładowarki na zewnątrz lub w pobliżu nagranych powierzchni.
4. Nie należy czyścić główki szczoteczki, uchwytu szczoteczki ani ładowarki w zmywarce.
5. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do czyszczenia zębów, dziąseł i języka. Nie należy używać go do innych celów. Zaprząstą używania urządzenia i skonsultuj się z lekarzem w celu uzyskania wsparcia w przypadku wystąpienia bólu lub dyskomfortu.
6. Zaprząstą używania główki szczoteczki ze zgniecionymi lub zagiętymi włoskami. Wymieniaj główkę szczoteczki co 3 miesiące lub wcześniej, jeśli pojawiają się oznaki zużycia.
7. Jeśli pasta do zębów, której używasz, zawiera wodorowęglan sodu, nadtlenek lub inne wodorowęglany (częste składniki wybielających past do zębów), pamiętaj, aby po każdym użyciu dokładnie umyć główkę szczoteczki mydłem. Zapobiega to ewentualnemu pękaniu plastiku.
8. Jeśli w ciągu ostatnich 2 miesięcy miałeś operację w obrębie jamy ustnej lub dziąseł, przed użyciem tego urządzenia skonsultuj się z dentystą.

INSTRUKCJA ŁADOWANIA

1. Jeśli bateria jest słaba, wskaźnik ładowania będzie migał na czerwono, aby przypomnieć użytkownikowi, że bateria jest słaba i wymaga naładowania.
2. Podłącz urządzenie do portu ładowania DC. Podłącz kabel USB do dowolnego, odpowiedniego źródła zasilania. Wskaźnik ładowania będzie czerwony podczas ładowania (pełne ładowanie może być zakończone w około 8 godzin). Po pełnym naładowaniu, będzie automatycznie wyłączać się, aby zapobiec przeładowaniu. (Proszę zachować suchy port podczas ładowania)
3. Po użyciu szczoteczki, lampka wskaźnika baterii zapali się na około 20 sekund i będzie pulsować kolorem odpowiadającym pozostałej ilości baterii (patrz wykres poniżej).

Indicator Status	Battery Status
wskaźnik świetlny wyłączony, produkt nie działa	Poziom baterii <10%
Lampka sygnalizacyjna pulsuje na czerwono	Poziom baterii 10%-30%
1/3 lampki kontrolnej pulsującej na zielono	Poziom baterii 30%-50%
2/3 lampki kontrolnej pulsującej na zielono	Poziom baterii 50%-80%
dioda sygnalizacyjna w całości pulsuje na zielono	Poziom baterii 100%

GŁÓWKA SZCZOTECZKI

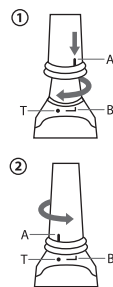

ZAŁOŻENIE:

ZAŁOŻENIE:
Załóż nową główkę szczoteczki, jak pokazano na zdjęciu, upewnij się, że A i B są wyrównane, a następnie dokręć A i T, aby wyrównać zgodnie z kierunkiem strzałki.

ZDEJMOWANIE:

ZDEJMOWANIE:
Odkręć główkę szczoteczki w kierunku strzałki, aż do wyrównania A i B, a następnie zdjąć w kierunku 1*.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Zmoczyć włosie i nałożyć niewielką ilość pasty do zębów.
2. Przyłożyć włosie do zębów pod lekkim kątem w kierunku linii dziąseł. (Rys.1)
3. Naciśnij przycisk mode, aby wybrać tryb.
Do dyspozycji jest 5 trybów: White, Clean, Sensitive, Polish, Massage.
UWAGA: Podczas szczotkowania, jeśli naciśniesz przycisk Mode, szczoteczka będzie pracować w kolejnym trybie i rozpocznie kolejny 2 minutowy cykl, a wskaźnik trybu będzie się świecił.
4. Zastosuj lekki nacisk i delikatnie przesuwaj główkę szczoteczki w przód i w tył po zębach.
5. Aby zmaksymalizować skuteczność czyszczenia, podziel swoją jamę ustną na 4 sekcje. Zaczynij od sekcji 1 i szczotkuj każdą sekcję przez 30 sekund. Akcja szczotkowania będzie wstrzymywana pomiędzy każdą 30-sekundową przerwą, wskazując, kiedy należy przejść do następnej sekcji. Szczoteczka zatrzyma się automatycznie po 2 minutach użytkowania. (Rys. 2)


CZYSZCZENIE SZCZOTECZKI DO ZĘBÓW

1. Oplucz główkę szczoteczki i włosie łagodnym strumieniem wody i potrząśnij, aby usunąć nadmiar wody.
2. Zdejmij główkę szczoteczki, umyj szyjkę i uchwyt szczoteczki wodą lub przetrzyj powierzchnię szczoteczki czystą, wilgotną szmatką.


UTYLIZACJA

Źródłem zasilania tego produktu jest bateria litowo-jonowa, która może zostać poddana recyklingowi. Po zakończeniu eksploatacji produktu należy zawsze wyjąć baterię przed wyrzuceniem produktu i poddać ją recyklingowi lub utylizacji zgodnie z lokalnymi wymogami dotyczącymi gospodarki odpadami. W przypadku pytań dotyczących recyklingu należy skontaktować się z lokalnym biurem ds. zarządzania odpadami.

1. Odetnij końcówkę uchwytu szczoteczki do zębów (pomiedzy 15-26mm od dołu, poniżej lampki kontrolnej baterii)

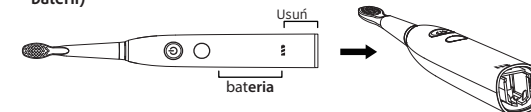

2. Przytrzymaj uchwyt przy płaskiej powierzchni. Wyjmij uchwyt baterii

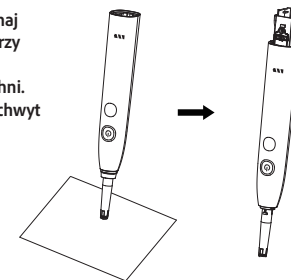

DEMONTAŻ BATERII

3. Oderwij przezroczystą taśmę po wyjęciu uchwytu baterii.



4. Wyjąć baterię z uchwytu po oderwaniu taśmy



IMPORTER: SmarTbest. 14-400 Pasłęk, ul. Dworcowa 28/22
Wyprodukowano w Chinach. Niniejszym NINGBO SEAGO ELECTRIC CO. LTD oświadcza, że urządzenie SG-977 jest zgodne z zasadniczymi wymogami oraz innymi stosowanymi postanowieniami dyrektywy EN 55014-1:2006+A2:2011, EN 55014-2:2015. Deklaracja zgodności do pobrania: www.seago.cn

Producent: NINGBO SEAGO ELECTRIC CO., LTD

Add: NO.239 Jianghu Road, Jiangbei District, Ningbo, Zhejiang, China
Tel:86-0574-88228700 Email: info@seago.cn

