

Szczoteczka soniczna

Instrukcja obsługi

Model: SG-977

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem korzystania z produktu i właściwe zachowanie jej na przyszłość.

Instrukcje




Wymiana główek szczoteczek




Wymiana baterii

Obróć pokrywę baterii w kierunku ①, aby linia wskaźnika zównała się ze strzałką, i wyciągnij ją, jak ②.
Włóż nową baterię AAA zgodnie z właściwym kierunkiem anody i katody. Naciśnij pokrywę baterii jak ③, aby linia wskaźnika zównała się ze strzałką i obróć ją mocno jak ④, a następnie linia wskaźnika zówna się z kropką.

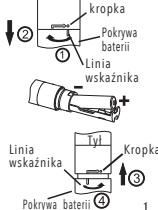

Instrukcja szczotkowania

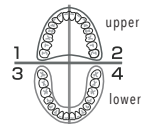

- 1 Zwiłż zęby i nałożyć odpowiednią ilość pasty do zębów. (Aby uniknąć rozpryskiwania pasty, przyklej ją do zębów, a następnie naciśnij przycisk zasilania).
- 2 Umieść włosie szczoteczki do zębów pod lekkim kątem w kierunku dziąsła.
- 3 Kiedy naciśniesz przycisk po raz pierwszy, biała dioda LED będzie włączona przez 30 sekund przy pominięciu, naciśnij przycisk ponownie, kolorowa dioda LED będzie włączona, wibracja start.
- 4 Naciśnij button power, delikatnie move głowę szczoteczki powoli przez zęby w małym ruchu w górę i w dół, dla jednej sekcji (jak pokazano na zdjęciu), proszę szczotkować 10 sekund każdy na przedniej, tylnej i powierzchni żucia. Szczotka przypomni Ci zmieniającą się sekcję co 30 seconds boy w iborat 100n. The brush will auto shut off at 2 minutes after 4sect 100nscleaned. Take the toothbrush out from your mouth, wash it and then put it in a ventilated and dry place.
- 5
- 6

4 Ostrzeżenia

- 1 Nie otwieraj, nie naprawiaj i nie zmieniaj produktu bez upoważnienia.
- 2 Dzieci, które nie są w stanie obsługiwać urządzenia, powinny być nadzorowane przez dorosłych.
- 3 Nie należy moczyć produktu w wodzie przez dłuższy okres czasu.
- 4 Wyjmij baterię, jeśli nie zamierzasz używać produktu przez dłuższy okres czasu.

- 5 Nie należy używać więcej niż zakres funkcjonalny samego produktu.
- 6 Ten produkt jest przeznaczony do użytku domowego do czyszczenia zębów, dziąsła i języka tylko, nie używaj go do innych celów.
- 7 proszę użyć siły wibracji z samej szczoteczki do zębów, nie dociskaj włosia mocno do zębów lub dziąsła podczas użytkowania.
- 8 Nie umieszczaj produktu w warunkach wysokiej temperatury lub bezpośrednio pod światło słoneczne.
- 9 Nie uderzaj szczoteczką z zbyt dużą siłą.

Specyfikacja

Materiał: DuPont Nylon/ABS/TPE

Zasilanie: 1 x bateria AAA

Częstotliwość: 2,4000 uderzenia na minutę

Żywotność baterii: do 150 dni

Wymiary: 188 x 19 x 19 mm

Standard produktu: GB4706.59-2008

Karta gwarancyjna

Dziękujemy za wybór seago sonicznej szczoteczki do zębów i sanitaryzacji szczoteczek do zębów. wszystkie produkty pomyślnie przeszły rygorystyczne procesy zapewnienia jakości, seago gwarantuje, że produkty są wolne od wad przy normalnym użytkowaniu i obsłudze dla pierwotnego nabywcy. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty wydrukowanej na ważnej fakturze przez okres jednego roku, nieautoryzowany demontaż lub naprawa spowoduje utratę gwarancji. bezpłatna wymiana w ciągu 2 lat od daty zakupu, połowa ceny za więcej niż jeden rok. Możesz skontaktować się z seago. Niniejsza gwarancja obejmuje części zamienne. Nie obejmuje ona uszkodzeń spowodowanych normalnym użytkowaniem lub wypadkami, takimi jak upuszczenie urządzenia. Gwarancja jest nieważna, jeśli z urządzeniem używane są inne kable do ładowania niż ten, który otrzymałeś. Dla wszelkich roszczeń gwarancyjnych. dowód zakupu musi być dostarczony. Z tego powodu, proszę zachować paragon na czas trwania okresu gwarancyjnego. Unfortunately, koszty wysyłki są bezzwrotne. W przypadku pytań dotyczących produktu prosimy o kontakt z obsługą klienta seago pod numerem 0086-574 88228700 lub pocztą elektroniczną info@seago.cn.

Ochrona środowiska

Informacje dla użytkownika o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Przedstawiony symbol przekreślonego kosza umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarskimi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespół polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzeń umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki zwrotu.

Pozostałe informacje

Importer: Smartbest, ul. Dworcowa 28/22, 14-400 Pasłęk. Producent: NINGBO SEAGO ELECTRIC CO. LTD Address: No.239 Jianghu Road, Jiangbei District, Ningbo, Zhejiang, Chi na. WEB: www.seago.cn. Wyprodukowano w Chinach. Niniejszym NINGBO SEAGO ELECTRIC CO. LTD oświadcza, że urządzenie SG-977 jest zgodne z zasadniczymi wymogami oraz innymi stosowanymi postanowieniami dyrektywy EN 55014-1:2006+A2:2011, EN 55014-2:2015v. Deklaracja zgodności do pobrania: www.seago.cn.