

SEAGO


Elektryczna szczoteczka do zębów SG-982

WSTĘP

Elektryczna szczoteczka do zębów seago pomaga codziennie czyścić zęby i chronić jamę ustną. Przeczytaj uważnie instrukcję, aby zrozumieć, jak korzystać z elektrycznej szczoteczki do zębów.

OPIS:

1. Główna szczoteczka
2. Baza ładowująca
3. Adapter USB
4. Przycisk włączania/wyłączania
5. Wskaźnik intensywności
6. Przycisk M
7. Wyświetlacz trybu
8. Wskaźnik zmiany główki szczoteczki
9. Wskaźnik ładowania
10. Etui podróżne

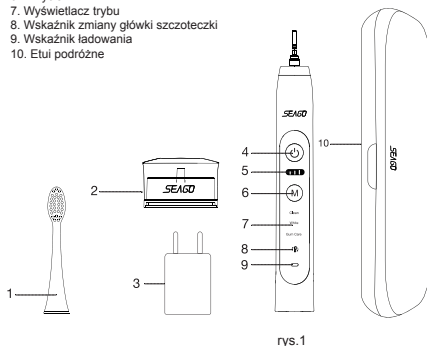

BEZPIECZEŃSTWO

1. Nie otwieraj, nie naprawiaj ani nie zmieniaj produktu bez upoważnienia.
2. Nie uderzaj ani nie upuszczaj produktu, jeśli produkt jest uszkodzony, przestań go używać.
3. Przed podłączeniem do zasilania sprawdź, czy lokalne napięcie jest odpowiednie dla oznaczonego napięcia. Ten produkt jest odpowiedni tylko ze specjalnymi główkami szczoteczek do zębów.
4. Skontaktuj się z dentystą przed użyciem, jeżeli przeszedłeś operację dziąsła, jamy ustnej w przeciągu 2 ostatnich miesięcy.
5. Jeśli zęby krwawią po użyciu szczoteczki do zębów lub krwawienie trwa dłużej niż tydzień, proszę skonsultować się z dentystą. Ten produkt jest przeznaczony do czyszczenia zębów, dziąsła i języka. Nie do innych celów.
6. Dzieci powinny być nadzorowane, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i upewnić się, że nie bawią się szczoteczką do zębów.
7. Trzymaj szczoteczkę z dala od wysokiej temperatury i bezpośredniego światła słonecznego.
8. Woda w porcie ładowania może spowodować zwarcie. Utrzymuj port ładowania w stanie suchym podczas ładowania.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Włóż główkę szczoteczki do podstawy szczoteczki.
2. Złóż główkę szczoteczki wodą i nałóż niewielką ilość pasty do zębów.
3. Delikatnie umieść włosie szczoteczki na zębach w kierunku linii dziąsła.
4. Włącz szczoteczkę do zębów i wybierz tryb, którego chcesz używać do mycia zębów.
5. Co 30 sekund szczoteczka zatrzyma się na 0,5 sekundy, aby przypomnieć o zmianie pozycji. Po 2 minutach szczoteczka automatycznie się wyłączy.
6. Oczyść główkę szczoteczki pod bieżącą wodą.

Uwaga 1: Delikatnie przesuwaj główkę szczoteczki wzdłuż zębów w przód i w tył, aby uzyskać efekt głębokiego czyszczenia. Prawidłowo dopasuj lub przesuń włosie do linii zębów i dziąsła. Użyj siły vibracji szczoteczki do zębów, nie dociskaj główki szczoteczki zbyt mocno do zębów. Upewnij się, że włosie pozostaje proste podczas szczotkowania zębów.

Uwaga 2: Włącz lub wyłącz szczoteczkę do zębów, naciskając przycisk włączania/wyłączania (4 na obrazku 1).

Uwaga 3: Naciskając przycisk M (6 na obrazku 1) w stanie wyłączenia, możesz wybrać różne tryby (Clean, White, Gum Care).

Uwaga 4: Naciskając przycisk M (6 na obrazku 1) w stanie włączonym, możesz zwiększyć intensywność drgań szczoteczki do zębów. Istnieją łącznie 3 różne intensywności.

3 tryby x 3 intensywności

Każdy tryb jest dostępny w 3 intensywnościach, aby dopasować się do różnych sytuacji i jamy ustnej.

Tryb Clean

Extra delikatny dla wrażliwych zębów i dziąsła. Polecany do codziennego użytku.

Tryb White

Whitening skupia się na rozjaśnieniu zębów poprzez usuwanie przebarwień powierzchniowych.

Tryb Gum care

Delikatnie stymuluje i masuje dziąsła, aby poprawić zdrowie dziąsła.

CZYSZCZENIE SZCOTECZKI

Uchwyty i podstawkę ładowającą można czyścić miękką, wilgotną ściereczką. Nie umieszczaj uchwyty ani bazy ładowanej na dłuższy czas pod wodą. Osusz uchwyty i podstawkę suchymi szmatkami. Główkę szczoteczki można czyścić wodą (zaleca się jej czyszczenie po każdym użyciu). Nie ścisnąć ani nie ciągnąć włosia, aby uniknąć deformacji.

JAK ŁADOWAĆ

1. Ładowanie indukcyjne, użytkownicy muszą tylko umieścić szczoteczkę do zębów na podstawie ładowanej, do której podłączono źródło zasilania, a szczoteczka do zębów zostanie naładowana.
2. Wskazówki dotyczące ładowania, ładuje się, gdy świeci dioda LED. Wskaźnik świetlny zgłasza po pełnym naładowaniu i nie najmniej więcej niż 10 godzin.
3. Przycisk wielofunkcyjny nie może być używany podczas ładowania.
4. Jeśli włączona szczoteczka zostanie umieszczona na podstawie ładowanej, przestanie działać i przejdzie w tryb ładowania.

CECHY I DANE TECHNICZNE

Model: SG-982

Rozmiar produktu: 27,1 x 27,1 x 252,5 mm

Materiał produktu: ABS/TPE/PP/Nylon

3 tryby: clean, white, gum care

3 intensywności: miękkiej, średniej, wysokiej

Wibruje: 2000 uderzeń/minutę

Moc wejściowa: 1,5 W

Bezprzewodowe ładowanie indukcyjne 4 godziny szybkiego ładowania,

naładowanie do 30 dni

Zaleca się wymianę główki szczoteczki co 3 miesiące lub wcześniej, jeśli włosie się postarzeje, wskaźnik będzie migać przez około 30 sekund, aby przypomnieć użytkownikowi o wymianie główek szczoteczki po 3 miesiącach (180 razy).

OCHRONA ŚRODOWISKA

Informacje dla użytkownika o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Przedstawiony symbol przekreślonego kosza umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucić razem z odpadami gospodarskimi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższych punktach zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki zwrotu.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Import: Smartbest, ul. Dworcowa 28/22, 14-400 Pasiek. Producent: NINGBO SEAGO ELECTRIC CO. LTD Address: No.239 Jianghu Road, Jiangbei District, Ningbo, Zhejiang, Chi na. WEB: www.seago.cn. Wyprodukowano w Chinach. Niniejszym NINGBO SEAGO ELECTRIC CO. LTD oświadcza, że urządzenie SG-977 jest zgodne z zasadniczymi wymogami oraz innymi stosowanymi postanowieniami dyrektywy EN 55014:2006+A2:2011, EN 55014:2:2015. Deklaracja zgodności do pobrania: www.seago.cn.

