


SEAGO

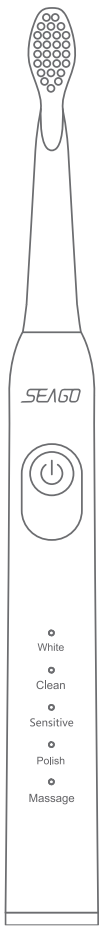

SONICZNA SZCZOTECZKA SG-540


INSTRUKCJA

Dziękujemy za wybranie naszej sonicznej szczoteczki do zębów. Firma SEAGO jest zaangażowana w dostarczanie opłacalnych produktów, które lepiej czyszczą zęby i pomagają chronić zdrowie jamy ustnej.


Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Użytkownicy, którzy nie korzystają z elektrycznych szczoteczek do zębów mogą doświadczyć lekkiego zdrętwienia lub innych odczuć po kilku pierwszych użyciach. Proszę się nie martwić, ten dyskomfort powinien zniknąć po kilku dniach. A jeśli po tym czasie nadal odczuwasz dyskomfort, proszę skonsultuj się ze swoim dentystą.
- Nie należy demontować, naprawiać ani zmieniać produktu bez upoważnienia.
- Jeśli produkt jest uszkodzony, należy zaprzestać jego używania.
- Przed ładowaniem należy sprawdzić, czy lokalne napięcie jest zgodne z podanym na opakowaniu.
- Ten produkt może używać tylko specjalnej główki szczoteczki do zębów wyprodukowanej przez SEAGO.
- Jeśli w ciągu ostatnich dwóch miesięcy miałeś operację jamy ustnej lub dziąseł, przed użyciem produktu skonsultuj się z dentystą.
W przypadku wystąpienia krwawienia po wielokrotnym użyciu lub gdy krwawienie trwa dłużej niż kilka dni, należy skonsultować się z dentystą.
- Ten produkt jest przeznaczony do czyszczenia zębów, dziąseł i języka, nie do innych celów.
- Ten produkt nie jest zabawką. Dzieci powinny być nadzorowane w celu zapewnienia prawidłowego użytkowania.
- Unikaj umieszczania w wysokich temperaturach lub w bezpośrednim świetle słonecznym.

Nazwy elementów

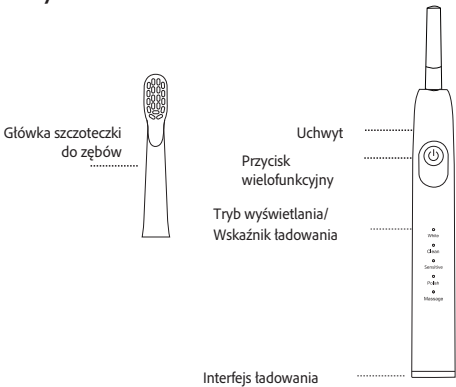

Zmiana główki szczoteczki do zębów

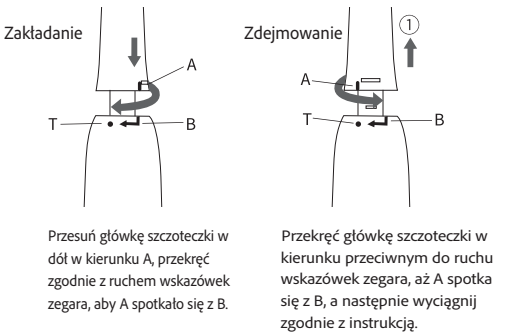

Cechy

1. Czyści efektywnie 40 000 razy na minutę.
2. W 5 trybach pracy (White, Clean, Sensitive, Polish, Massage) aby sprostać różnym wymaganiom.
3. Zalety: ergonomiczna konstrukcja, wodoodporny, antypoślizgowy i wygodnie trzymanie.
4. Produkt działa do 120 dni na pełnym ładowaniu dzięki bezpiecznej i trwałej baterii litowej, a lampka wskaźnika ładowania będzie mrugać i ostrzegać, że produkt wymaga ładowania.
5. Pamięć trybu Smart, 2 minuty auto stop i 30 sekundowe przypomnienie timera do poruszania się pomagają nabrać dobrych nawyków szczotkowania.
6. Wskaźnik baterii:
Gdy produkt przestanie działać, wskaźniki LED będą świecić.
Poziom baterii: <20%, dolny wskaźnik LED zaświeci się.
Poziom baterii: 20%-40%, zapalają się dwa dolne wskaźniki LED.
Poziom baterii: 40%-60%, zapalają się trzy dolne wskaźniki LED.
Poziom baterii: 60%-80%, zapalają się cztery dolne wskaźniki LED.
Poziom baterii: 80%-100%, zapalają się wszystkie figurki LED.

Używanie szczoteczki do zębów

1. Załóż główkę szczoteczki i upewnij się, że jest zablokowana. Zwilż włosie i nałóż odpowiednią ilość pasty do zębów.
2. Umieść szczoteczkę w ustach przed włączeniem.
3. Delikatnie przesuwaj główkę szczoteczki po każdej części zębów przez 10 sekund, w tym przednią, tylną i powierzchnią do żucia.
4. Przycisk wielofunkcyjny wymaga ciągłego działania w ciągu 5 sekund w celu przełączenia pierwszego trybu, w przeciwnym razie przestanie działać automatycznie.
5. Naciśnij przycisk wielofunkcyjny, aby mieć do wyboru 5 trybów.
6. Szczoteczka do zębów wyłączy się automatycznie po 2 minutach czyszczenia.


Instrukcja ładowania

1. Gdy pojemność baterii jest niska, produkt nie uruchomi się lub lampka wskaźnika ładowania zamiga 10 razy, aby ostrzec, że produkt musi zostać naładowany.
2. Nadaje się do ładowarki z kablem ładującym USB, który jest dołączony do opakowania.
3. Kontrolki będą świecić od dołu podczas ładowania i wyłączyć się automatycznie, gdy bateria zostanie w pełni naładowana.
4. Przy pierwszym użyciu lub bateria była rozładowana przez długi czas, wskaźnik może nie świecić w ciągu pierwszych 5 minut, ponieważ produkt się wyczerpał.


Wyjmowanie akumulatora

Ten produkt zawiera baterię litową. Przed wyrzuceniem należy wyjąć baterię i poddać ją recyklingowi lub utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lokalnym działem gospodarki odpadami.


Przy wyjmowaniu baterii potrzebne są następujące narzędzia: szczypce, nożyczki.
Uwagi: gdy zdecydujesz się wyrzucić szczoteczkę do zębów, musisz wyjąć baterię. Przed wyjęciem upewnij się, że bateria jest rozładowana. Podczas korzystania z narzędzi należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i podjąć środki ochronne, aby uniknąć obrażeń.

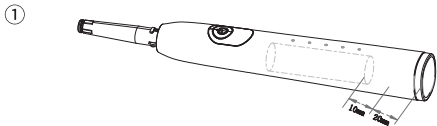


Najpierw należy zdjąć głowicę szczotki i za pomocą pily zaznaczyć 10 mm od pily pozycję.

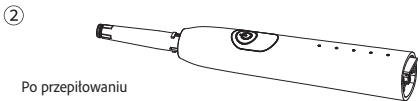

Po przepitowaniu

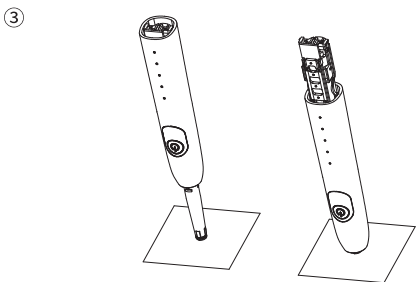

Przyłóż drążek wahadłowy do blatu stołu, chwycić za uchwyt i nacisnąć w dół, możesz usunąć wewnętrzny wspornik.

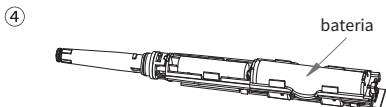

Po zdjęciu wspornika widać baterię. Wyjmij ją z gniazda baterii i przetrnij przewód baterii lub podkładkę.

Specyfikacja

Model: SG-540
Temperatura pracy: 5-40°C
Napięcie wejściowe: 5V
Czas ładowania: ≤4hours
Moc wejściowa: 1.5W
Standard operacyjny: GB4706.59-2008, GB4706.1-2005

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Słabnie siła wibracji	Nadmerna siła	Delikatnie umieść główkę szczoteczki na twoich zębach
Czas pracy jest krótki	1. Uchwyt nie znajduje się we właściwym miejscu, co powoduje brak możliwości ładowania. 2. Moc baterii jest niska.	1. Upewnij się, że umieściłeś go we właściwy sposób w ładowarce 2. Aby przedłużyć czas ładowania
Produkt nie działa	1. Moc baterii jest niska. 2. Inne przyczyny.	1. Pozwól na naładowanie baterii 2. Skontaktuj się z działem obsługi klienta Seago

Gwarancja

Seago udziela gwarancji na szczoteczkę na okres jednego roku od daty zakupu na wady wynikające z wadliwego wykonania lub materiałów. W przypadku roszczeń gwarancyjnych prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres info@seago.cn lub przesłanie zgłoszenia na adres www.seago.cn. Dział obsługi klienta skontaktuje się z Państwem w celu rozpoczęcia procedury gwarancyjnej. Niniejsza gwarancja obejmuje części robocze. Nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych normalnym użytkowaniem lub wypadkami, takimi jak upuszczenie urządzenia. Inne wyjątki obejmują niewłaściwe użytkowanie lub zaniedbanie urządzenia. Niniejsza gwarancja jest nieważna, jeśli z urządzeniem używane są inne kable ładujące oprócz tego, który otrzymałeś. W przypadku jakichkolwiek roszczeń gwarancyjnych, należy przedstawić dowód zakupu. Z tego powodu należy zachować paragon przez cały okres gwarancji. Niestety koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi. W przypadku pytań dotyczących produktu prosimy dzwonić do działu obsługi klienta Seago pod numer 0086-574-88228700 lub e-mail iinfo@seago.cn

Pozostałe informacje

Importer: Smartbest, ul. Dworcowa 28/22, 14-400 Pastłęk. Producent: NINGBO SEAGO ELECTRIC CO. LTD Address: No.239 Jianghu Road, Jiangbei District, Ningbo, Zhejiang, Chi na. WEB: www.seago.cn. Wyprodukowano w Chinach. Niniejszym NINGBO SEAGO ELECTRIC CO. LTD oświadcza, że urządzenie SG-977 jest zgodne z zasadniczymi wymogami oraz innymi stosowanymi postanowieniami dyrektywy EN 55014-1:2006 +A2:2011, EN 55014-2:2015v. Deklaracja zgodności do pobrania: www.seago.cn.